

产品手册



Tango-H_CXCR6 CHO-K1 Cell Line

货号: GM-C14346


版本号: 4.0.26.923

G 蛋白偶联受体 (G protein-coupled receptors, GPCRs) 家族是人类中最庞大的膜蛋白家族, 也是很多药物的重要靶点, GPCR 家族中有 800 多个成员, 其中近 400 个可以考虑作为药物靶标。靶向 GPCR 的药物占有 FDA 批准药物的 34%, 主要适应症为高血压、糖尿病、肥胖、过敏和阿尔茨海默病, 以及几种中枢神经系统疾病。

GPCR 激活包括两类信号通路, G 蛋白依赖的信号通路和非 G 蛋白依赖的信号通路。G 蛋白依赖的信号通路中, GPCR 与胞内 G 蛋白 (Gi/Go、Gs、Gq 和 G12/G13) 偶联, 其信号的激活和抑制, 可以通过检测 GPCR 介导的第二信使如钙流、环腺苷酸(cAMP)等。非 G 蛋白依赖的信号通路, 核心为 GPCR 诱导 β -arrestin 易位, 这一过程独立于 G 蛋白受体信号, 也可用于孤儿受体, 可以通过 β -arrestin 检测非 G 蛋白依赖的信号通路激活。

CXCL16 是 CXCR6 的配体, 作用于调控癌症转移和侵袭。CXCL16 和 CXCR6 可能标记在炎症环境中出现的癌症, 并通过对癌细胞生长的直接影响和通过诱导肿瘤相关白细胞的迁移和增殖来介导炎症的促肿瘤发生作用。

Tango-H_CXCR6 CHO-K1 Cell Line 细胞系以 CHO-K1 为工具细胞, 采用慢病毒感染的方式, 依靠 Tango 技术构建 Tango CXCR6 报告基因的细胞系, 当 CXCL16 激活 CXCR6 β -arrestin 2 通路时, β -arrestin 2 携带蛋白酶切下转录激活元件, 转录激活元件移位到细胞核中, 激活荧光素酶报告基因, Luciferase 报告基因读值即代表信号通路的激活效果, 因此可用于靶向 CXCL16/CXCR6 功能性抗体的活性检测。

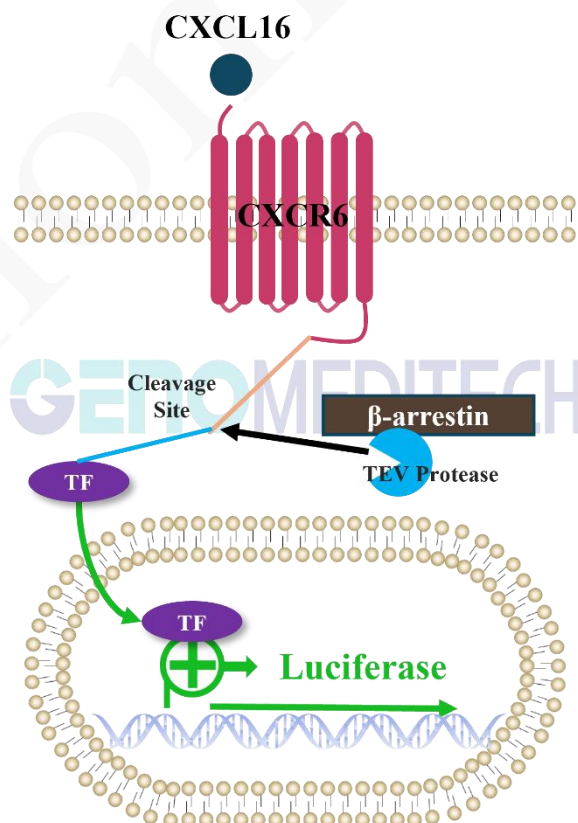

规格参数


数量	5E6 Cells per vial, 1 mL
产品形式	1 支冻存细胞
储运条件	干冰运输, -196°C 以下长期储存
复苏培养基	F12K+10% FBS+1% P.S
生长培养基	F12K+10% FBS+1% P.S+4 µg/mL Blasticidin+100 µg/mL Hygromycin+4 µg/mL Puromycin
培养备注	无
细胞冻存液	90% FBS+10% DMSO
生长特性	贴壁
培养条件	37°C, 5% CO ₂
支原体检测	该细胞系已通过支原体检测, 结果为阴性。
生物安全等级	Biosafety Level 2
备注	建议尽早扩增该细胞, 并冻存至少 10 支, 以便后续使用。

实验材料与仪器

名称	Manufacturer/Catalogue No.
F12K	BOSTER/PYG0036
Fetal Bovine Serum	ExCell/FSP500
Pen/Strep	Thermo/15140-122
Blasticidin	Genomeditech/ GM-040404
Hygromycin	Genomeditech/ GM-040403
Puromycin	Genomeditech/ GM-040401
Recombinant Human CXCL16 Protein	Sino Biological/10834-H08H
GMOne-Step Luciferase Reporter Gene Assay Kit	Genomeditech/ GM-040503
96 well round cell culture plate	PakGent/CL-PT096
96-well White Opaque Plate	Thermo/236108
96-well U-bottom Plate	Saining/1014010
Countess 3 Automated Cell Counter	ThermoFisher/A49891
SpectraMax® L Microplate Luminometer	Moleculardevices/SpectraMax L


验证结果

信号通路

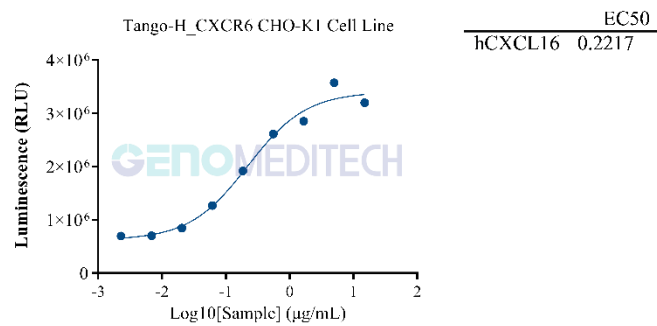

Recombinant Human CXCL16 Protein 激活验证。Tango-H_CXCR6 CHO-K1 细胞系 (GM-C14346) 按 1E4 细胞/孔接种于 96 孔板，加入梯度稀释的 Recombinant Human CXCL16 Protein (Sino Biological/10834-H08H)，于 assay buffer (F12K + 1% FBS + 1% P.S) 中孵育 16 小时后，采用 Luciferase Reporter Assay Kit (Genomeditech) 检测萤火虫荧光素酶活性，最大诱导倍数约为 [4.6]，数据以药物质量浓度表示。[protocol]

稳定性

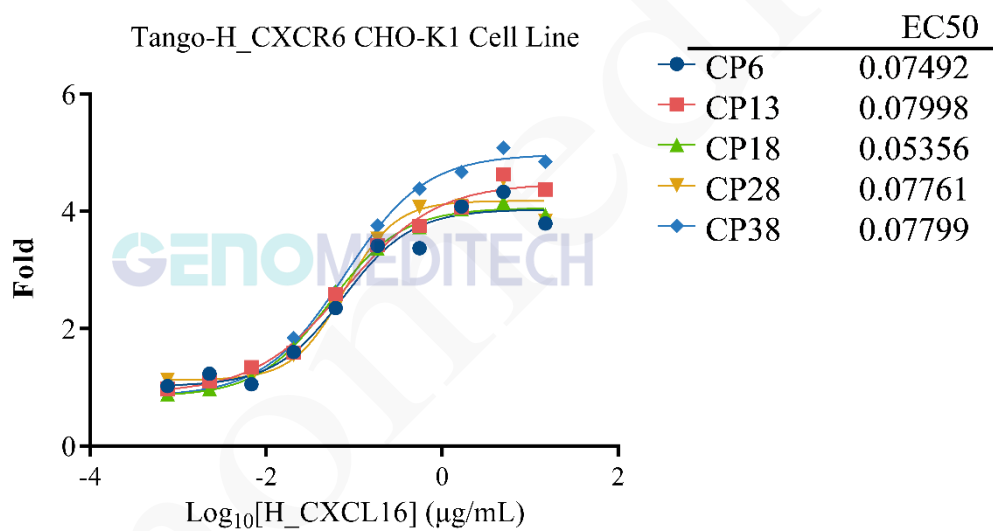

传代稳定性: Tango-H_CXCR6 CHO-K1 Cell Line 响应 (第 6-38 代)。将 Tango-H_CXCR6 CHO-K1 细胞系 (GM-C14346) 不同代次细胞按 1E4 细胞/孔接种于 96 孔板，加入梯度稀释的 Recombinant Human CXCL16 Protein (Sino Biological/10834-H08H)，于 assay buffer (F12K + 1% FBS + 1% P.S) 中孵育 16 小时后，采用 Luciferase Reporter Assay Kit (Genomeditech) 检测萤火虫荧光素酶活性，数据以药物质量浓度表示。

细胞复苏

复苏培养基：F12K+10% FBS+1% P.S

为确保最高存活率，应在收到冻存细胞后立即解冻并复苏培养。如果在收到细胞后需要继续储存，将其置于液氮罐中，严禁储存在-70°C，因为在-70°C下储存会导致活性丧失。

- 37°C水浴锅预热复苏培养基，加入预热后的复苏培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37°C恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下轻轻摇动解冻，直到刚刚融化（通常 2-3 分钟）。
- 用 70%乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀， $176 \times g$ ，离心 3 min，使细胞沉淀，弃上清。
- 使用 1 mL 复苏培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞 $\geq 3E6$ cells/mL。
- 通过补加复苏培养基的形式，调整活细胞密度到 $2-3E5$ cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养皿中。

细胞冻存

细胞冻存液：90% FBS+10% DMSO

- 使用 $176 \times g$ ，3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为 $5E6$ cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中，-80°C下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

细胞传代

生长培养基：F12K+10% FBS+1% P.S+4 μ g/mL Blasticidin+100 μ g/mL Hygromycin+4 μ g/mL Puromycin

细胞复苏后的 1 至 2 代，使用复苏培养基，待细胞状态稳定后，再更换为含有抗生素的生长培养基。

- 此细胞呈梭状，贴壁生长。培养箱中孵育 16-24 h 后，镜下观察细胞贴壁情况。当细胞密度大于 60%，即可进行细胞传代。
- 将皿或培养瓶中的培养液弃去，10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。
- 弃 PBS，加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液，37°C 消化 2-3 min，显微镜下观察。
- 待细胞变圆，细胞间隙明显，部分细胞刚开始脱离瓶壁时，加 2 mL 左右生长培养基混匀终止消化，将细胞小心吹打下来， $176 \times g$ 室温离心 3 min。
- 弃上清，细胞沉淀用生长培养基重悬，根据传代前细胞密度分盘（根据培养皿面积和细胞密度计算，传代后细胞密度为 20-30%）。

细胞传代比例为 1:4-1:5，2-3 天传代。

培养备注

- 细胞状态稳定后，传代后死细胞会变少，细胞生长速度趋于稳定，细胞形态均匀，胞体健壮。

实验方案

药物激活验证实验

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐 Tango-H_CXCR6 CHO-K1 Cell Line 细胞量为 1×10^4 cells/孔。本次实验使用 Human CXCL16 / SR-PSOX Protein (His Tag)（以下简称为 hCXCL16; 20.5 kDa）作为阳性药物，Conc.01 浓度为 15 $\mu\text{g/mL}$ ，3 倍梯度稀释，Conc.01-Conc.09 分别排布在 B2-B10，B11 为 0 浓度对照。周围孔加入 100 μL PBS，以防止边孔蒸发。

孔板排布如下：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A		PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	
B	hCXCL16	PBS	15 μg/mL	5 μg/mL	1.67 μg/mL	555.56 ng/mL	185.19 ng/mL	61.73 ng/mL	20.58 ng/mL	6.86 ng/mL	2.29 ng/mL	0	PBS
C		PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS	PBS
D													
E													
F													
G													
H													

加样步骤

- 在实验前 16-24 h，将细胞从培养瓶中取出，消化离心收集细胞沉淀，使用适量完全培养基重悬细胞，检测细胞活力并计数，再以完全培养基调整细胞浓度为 1×10^5 cells/mL。以排枪加 100 μL 细胞/孔至中间孔。周围的孔加 100 μL PBS。盖上班盖，于孵箱中孵育过夜使用。
- 使用 1 个无菌 96 孔 V 底板准备药物稀释。
- 每个待测药物，使用一行（如 B2-B10）。
- 母液配置

药物名称	储液	母液	配置方法
hCXCL16	0.2 mg/mL	/	直接使用储液

- 96 孔 V 底板中，加入 Assay Buffer，各孔体积见下表，如 B2 孔加入 152.6 μL Assay Buffer，B3-B11 孔，加入 110 μL Assay Buffer。
- 吸取不同体积的待测样品母液，加入到第一个梯度稀释孔中（如 B2 中加入 12.4 μL hCXCL16），混匀。

母液吸取		梯度稀释孔，依次从前孔吸取 55 μL，加入次孔										对照孔
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.4 μL hCXCL16	加入	152.6 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	110 μL	


- 从第一个梯度稀释孔 B2 中吸取 12.4 μL ，加入到第二个梯度稀释孔 B3，充分混匀。
- 以此类推，直至第 9 个梯度稀释孔（B10）。
- 将步骤 a 孵育过夜的孔板取出，每孔吸弃 90 μL 培养基。
- 加入步骤 h 准备好的梯度稀释液，每孔 100 μL 。
- 盖上班盖，于 37 $^{\circ}\text{C}$ CO_2 培养箱中培养 16 h。
- 使用报告基因检测试剂盒，检测 Luciferase。

报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

Tango-H_CXCR6 CHO-K1 Cell Line	0	15 $\mu\text{g/mL}$	2.29 ng/mL
	597245	3199279	694463

验证结果

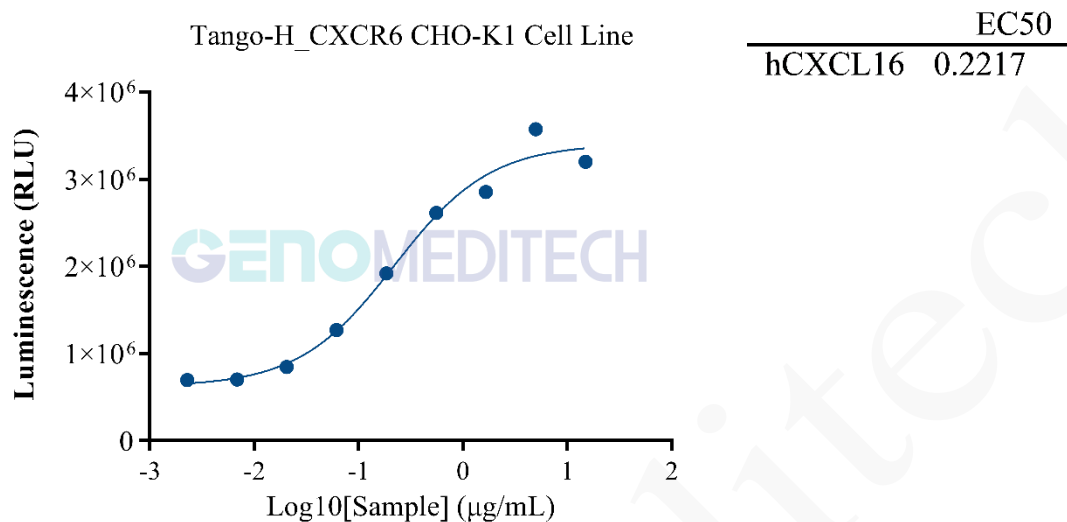

相关产品

CXCR6	
Cynomolgus_CXCR6 HEK-293 Cell Line	H_CXCR6 HEK-293 Cell Line
Tango-Mouse_CXCR6 CHO-K1 Cell Line	

使用许可协议

凡购买及使用本细胞系产品，即表明使用者自愿接受并遵守以下相关使用政策：

- 本细胞系产品限于科研用途，不得被利用于任何商业用途。
- 本产品严禁用于人类或动物疾病诊治，也不得直接用于人体相关实验。
- 用户及为其利益服务的第三方承包商仅可在约定科研范围内使用本材料及其子代，不得进行修饰，亦不得向任何其他实体（包括关联机构）分发、销售、转让或以其他方式提供吉满生物材料。
- 如需将本产品用于本声明范围以外的用途，须事先获得吉满生物科技（上海）有限公司的书面许可，详情请联系吉满生物科技（上海）有限公司。