


CMV-ZsGreen1-Puro Lentivirus

CMV-ZsGreen1-Puro 慢病毒是以 CMV 作为启动子,启动 ZsGreen1 绿色荧光蛋白的表达; PGK 启动 PuroR 抗性的表达。

图谱信息

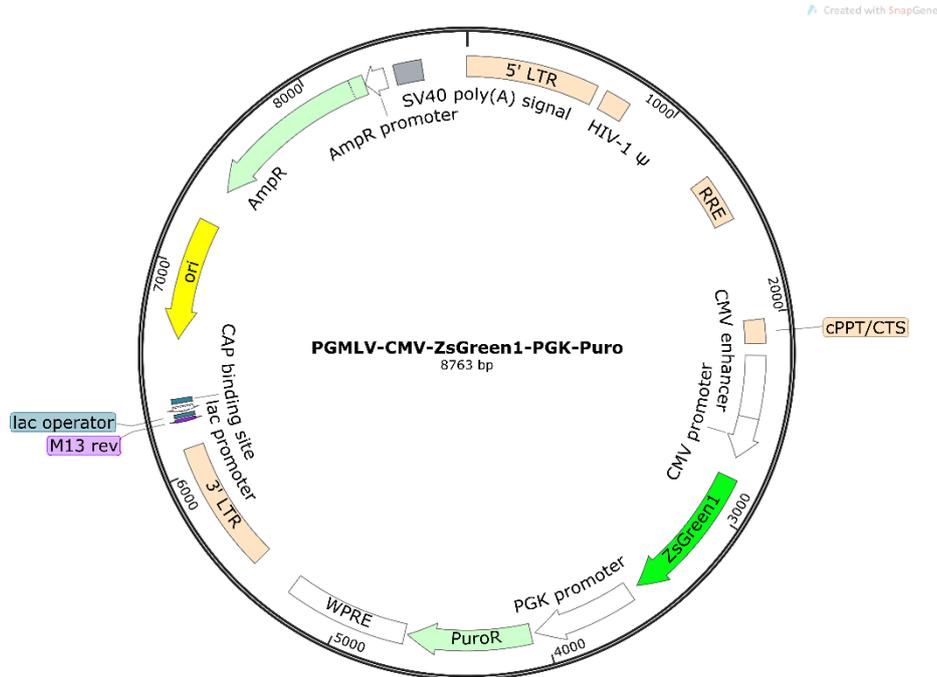

产品基本信息及组分

产品编号	产品组分	产品名称	包装规格
GM-0220LV47-1	GM-0220LV47E9-50	CMV-ZsGreen1-Puro	50 μ L \times 4 管 ($\geq 1E9$ TU/mL)
GM-0220LV47-2	GM-0220LV47E8-100	Lentivirus	100 μ L \times 10 管 ($\geq 1E8$ TU/mL)

注意事项:

1. 病毒操作时最好使用生物安全柜,如使用普通超净工作台操作病毒,请不要打开风机。
2. 病毒操作时请穿实验服,戴口罩和乳胶手套。
3. 操作病毒时必须特别小心,不要产生气雾或飞溅。如操作时超净台有病毒污染,立即用 10%次氯酸钠溶液擦拭干净。接触过病毒的枪头、离心管和培养板等需用 10%次氯酸钠溶液浸泡 1h 以上后弃去。
4. 用显微镜观察细胞感染情况时应遵从以下步骤:拧紧培养瓶或盖紧培养板。用 70%乙醇清理培养瓶外壁后到显微镜出观察拍照。离开显微镜试验台前,用 70%乙醇清理实验台。
5. 病毒操作完成后,用肥皂清洗双手。

保存条件:

-80 $^{\circ}$ C 保存。(保存时间以 12 个月以内为宜,如保存时间过长,使用前请重新检测病毒滴度)

备注:

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。